



Spoločnosť Foshan COXO Medical Instrument Co., Ltd.

Adresa: BLDG 4, okres A, priemyselná základňa nového svetelného zdroja v meste Guangdong, Južne od ulice Luocun, okres Nanhai, Foshan, 528226 Guangdong, Čína.

E-mailwww.coxotec.com

Fax: 0086-757-81800058

Pozornosť

Zakázať používanie dezinfekčných prostriedkov obsahujúcich chlór

3.

Vysušenie: Po vyčistení a dezinfekcii sa odporúča vysušiť stlačeným vzduchom.

4. Balenie

Po vysušení vložte diely do vrečka na sterilizáciu parou pre vzduchotesné zabalenie.

Pozornosť

Parné sterilizačné vrečko by malo spĺňať normu ISO 11607-1 a

Balenie musí byť zapečatené tesnením.

5. Sterilizácia:

- Sterilizovateľné príslušenstvo: Rukoväť, Mikroskúmvka, Ihla
- Požiadavky na sterilizáciu: 5 minút pri 134 °C

Pozornosť

1) Možno opätovne sterilizovať najmenej 250-krát

2) Výrobok po použití umiestnite do suchého a bezprašného prostredia.

sterilizácia

Údržba

Výrobok a príslušenstvo dezinfikujte po každom použití;

Po každom použití výrobok očistite čistou vodou s teplotou nižšou ako 38 °C.

Špecifikácie príslušenstva		
Ihla priemer (mm)	Vnútorný extraktor a vonkajší priemer (mm)	Maximálne časy pre ohýbanie ihly
φ0.45	φ0.5*φ0.8	10-krát
φ0.55	φ0.6*φ0.9	10-krát
φ0.60	φ0.7*φ1.1	10-krát

Rezný vrták (mm)	Rezacia kanyla (mm)
φ0.8	φ0.8
φ0.9	φ0.9
φ1.1	φ1.1

Prevádzkové prostredie, skladovacie a prepravné podmienky

Prevádzkové prostredie	
Prevádzková teplota	5 °C – 40 °C
Prevádzková vlhkosť	20 % – 80 %
Atmosférický tlak	86 kPa — 106 kPa

Podmienky skladovania a prepravy:

Skladovacia teplota	-10 °C – 55 °C
Skladovacia vlhkosť	93 %
Atmosférický tlak	50 kPa – 106 kPa

Dátum výroby a životnosť

Životnosť: 5 rokov

Dátum výroby nájdete na výrobku alebo na etike

Záruka

Na rukoväť sa vzťahuje 24-mesačná záruka a na ostatné príslušenstvo sa záruka nevzťahuje.

Symbol			
	Pozornosť		Sterilizovateľné v parný sterilizátor pri 134 °C
	Sériové číslo		Vertikálne nahor
	Výrobca		Prečítajte si návod na použitie
	Krehké		Uchovávať v suchu
	Špeciálna likvidácia odpadu z elektrických a elektronických zariadení		

Recyklácia a likvidácia

Likvidácia odpadu z prístrojov musí byť v súlade s národnými predpismi a normami. Zabezpečte, aby počas procesu likvidácie žiadne komponenty nespôsobili znečistenie.



Systém na vyhľadávanie súborov

C-FR1

Používateľská príručka

POZOR



Pred použitím si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku, kde nájdete pokyny na obsluhu.

1. Používajte iba originálne príslušenstvo.
2. Pred použitím zohľadnite zakrivenie koreňového kanálika, hrúbku steny koreňového kanálika a hĺbku zlomeného pilníka v koreňovom kanáliku.
3. Počas používania sledujte smer posunu produktu a smer ohýbania zlomeného pilníka.
4. Pred použitím skontrolujte výrobok, ak je poškodený, včas ho vymeňte;
5. Pred použitím výrobok sterilizujte.
6. Vyberte vytahovač podľa priemeru zlomenej hlavy pilníka.

Zamýšľané použitie

Systém na odstraňovanie pilníkov sa používa na odstraňovanie zlomených častí endodontických nástrojov z koreňových kanálikov a smie ho používať iba v zubných klinikách alebo nemocniciach odborný zdravotnícky personál.

Kontraindikácie


Používanie tohto produktu je zakázané v nasledujúcich situáciách.

1. Zlomený pilník sa nachádza v ohybe koreňového kanálika.
2. Stena koreňového kanálika je veľmi tenká.
3. Poškodený súbor sa nachádza na koreňovom hrote.

Charakteristický

1. Pod mikroskopom uchopte zlomený pilník stlačením posilňovacieho uzáveru, aby ste odstránili zlomený pilník alebo iné predmety z koreňového kanálika.
2. Stupeň ohybu extraktora je 45 stupňov, ktorý je možné nastaviť na 90 stupňov pomocou kľúča.
3. Výrobok je možné opätovne použiť.

Komponent

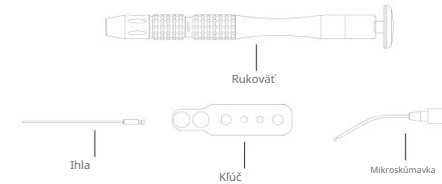

Inštalácia a demontáž




1. Inštalácia


Krok 1: Odstráňte spojovaciu objímku



Krok 2: Zatiačte krytku, aby ste odkryli otvor

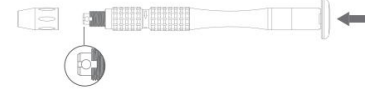

Krok 3: Po vložení ihly do otvoru uvoľníte uzáver, aby ste ho pevne utiahli.

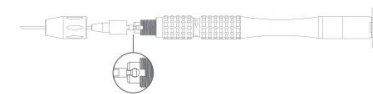


Krok 4: Zarovnajte mikroskúmvku so štrbinou a nainštalujte spojovaciu objímku.




2. Demontáž


Krok 1: Odstráňte spojovaciu objímku.

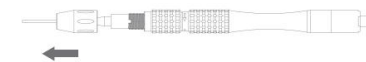

Krok 2: Stlačte uzáver a vyberte mikroskúmvku.

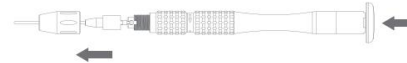

Krok 3: Zaisťte spojovaciu objímku.

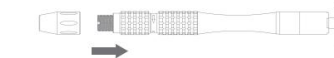

Pozornosť

Pri demontáži komponentov sa uistite, že poistný krúžok je odomknutý, aby sa zabránilo zatlačeniu tlačného krytu

Podrobné pokyny


1. Vyberte vrták Gates Glidden s dĺžkou vhodnou pre daný zub a odstráňte tolko plastového náboja, kolko je potrebné pre prístup.
2. Vytvorte priestor koronálne k prekážke pomocou rezacieho vrtáka.
3. Vyberte rezáciu kanylu a opatrne trepanujte okolo prekážky, kým zlomený pilník neodkryje 2 – 3 mm, aby sa zlomený pilník mohol dostať do otvoru.
4. Vložte mikroskúmvku vhodnej veľkosti cez koronálny koniec ihly a zaklinite ju medzi zlomený nástroj a vnútornú stenu ihly. Keď zatlačíte krytku dopredu, zakliesni sa medzi ihlu a zlomený nástroj.
5. Uťahnite poistný krúžok otáčaním v smere šípky, udržiavajte tlak na prítlačný kryt v smere hodinových ručičiek a apikálne a odstráňte celú zostavu zo zuba vrátane zlomeného nástroja.
6. Po použití sterilizujte.

Schéma fungovania:

Vložte mikroskúmvku vhodnej veľkosti cez koronálny koniec ihly a zaklinite ju medzi zlomený nástroj a vnútornú stenu ihly. Keď zatlačíte kryt dopredu, zasekne sa medzi ihlou a zlomeným nástrojom.

Uťahnite poistný krúžok otáčaním v smere šípky a udržiavajte tlak na vrchnák smerom nahor.

Uchopte túto polohu a zároveň rukou tlačte uzáver dopredu

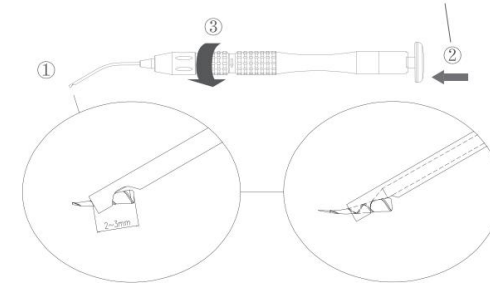

Odhaľuje 2-3 mm zlomený pilník

Tlieskajte zlomeným pilníkom mikroskúmvkou

Čistenie, dezinfekcia a sterilizácia

1. Čistenie
 - Na čistenie povrchu používajte čistú vodu s teplotou nižšou ako 38 stupňov Celzia
 - produkt
 - Vyčistite extraktor ihlou
 2. Dezinfekcia
 - Príslušenstvo osušte čistou handričkou
3. Sterilizácia
- Na utretie povrchu výrobku použite lekársky lieh